



Onderhoudsinstructies

Achter het oor - oplaadbaar - dome

Overzicht:


1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik mijn dome (zacht dopje) vervangen?
4. Hoe kan ik mijn hoortoestellen resetten?



1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

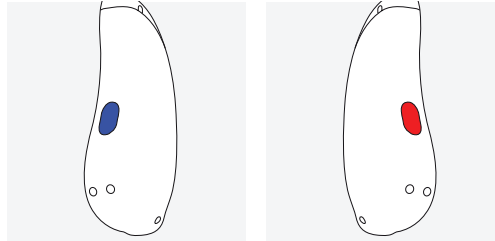

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?

1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in je **rechteroor**, **blauw** is voor je **linkeroor**
3. Schuif het hoortoestel achter je oorschelp
4. Hou de bocht van de fijne tube tussen je duim en wijsvinger. De tube of dopje moet wijzen in de richting van de opening van je gehoorgang
5. Plaats het dopje nu voorzichtig in je gehoorgang
6. Duw met het topje van je wijsvinger het dopje voldoende diep in je gehoorgang
 - a. Optioneel: Als er een draadje aan het dopje zit, plaatst je deze in je oorschelp om het hoortoestel stevig te plaatsen
7. Het toestel zit goed wanneer het kabeltje van de fijne tube goed aansluit tegen de zijkant van je hoofd
8. Wanneer het hoortoestel goed zit en je het niet meer aanraakt, mag het niet meer fluiten

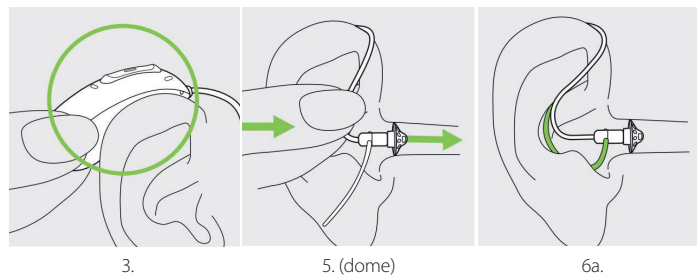


3.

5. (dome)

6a.

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?

1. Neem het hoortoestel vast bij het slangetje en neem het voorzichtig uit je oor
2. Trek zachtjes met je vrije hand je oorlel naar beneden

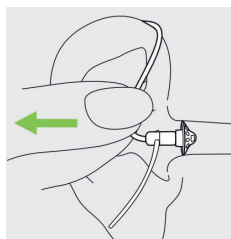

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en dopjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en de dopjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- Fijne tubes
- Dopjes/domes
- Droogtabletten of droogbox

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen en oplader zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

Algemene informatie

Voordat je haarlak of make-up gebruikt, dien je het hoortoestel uit je oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Je hoortoestellen zijn bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet je de hoortoestellen schoonmaken en daarna drogen.
- De hoortoestellen worden gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Dagelijks onderhoud

Hoortoestellen

Inspecteer het dopje en de tube op oorsmeer en vocht. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je hoortoestel. Het wordt afgeraden om deze onderdelen af te spoelen met water, omdat vocht hierdoor in de tube kan achterblijven. Vraag uw audicien om advies wanneer u uw hoortoestel grondig dient te reinigen. Leg je hoortoestellen dagelijks in de daarvoor voorziene droogbox of droogdoos met droogtablet.

Oplader

Zorg dat de oplaadingangen schoon zijn en reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je oplader.

Wekelijks onderhoud

Hoortoestellen

Reinig het dopje met een zacht doekje en reinigingsspray of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Reinig ook de contactpunten voor het opladen op je hoortoestel.

Oplader

Verwijder stof of vuil met een pluisvrije doek uit de oplaadingangen. Zorg er altijd voor dat de hoortoestellen en oplader droog en schoon zijn voordat je begint met opladen.

Maandelijks onderhoud


Inspecteer uw fijne tube op kleurveranderingen, verharding of scheuren. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dient de fijne tube vervangen te worden.

3. Hoe kan ik mijn dome (zacht dopje) vervangen?


Hoe moet ik mijn dome (zacht dopje) en filter vervangen?

Uw hoortoestel is uitgerust met een dome (zacht dopje). Controleer het dopje en vervang of reinig het als het er vies uitziet of als het volume of de geluidskwaliteit van het hoortoestel achteruit gaat. De dome moet elke maand worden vervangen.


De dome (zacht dopje) van de luidspreker verwijderen

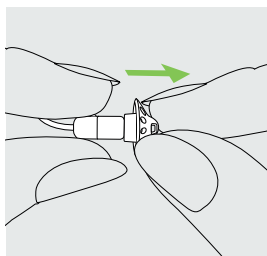

1. Verwijder de dome (zacht dopje) van de tube door de tube in de ene hand te houden en het dopje in de andere.

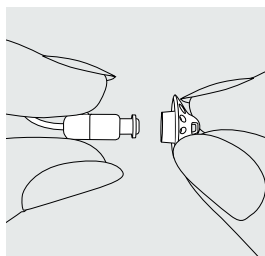


2. Trek zachtjes aan de dome (zacht dopje) om deze te verwijderen.

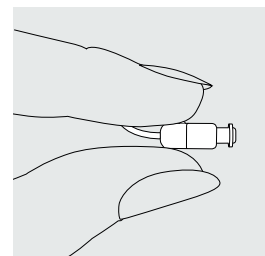


3. Reinig de luidspreker met een pluisvrije doek


De dome (zacht dopje) op de fijne tube plaatsen

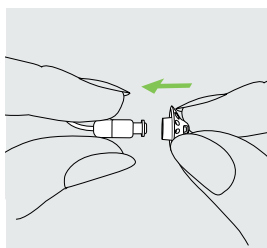

1. Hou de tube in de ene hand en de dome (zacht dopje) in de andere.

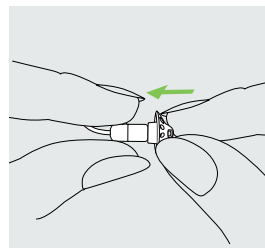

2. Schuif de dome (zacht dopje) over de tube.

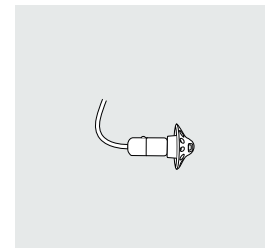

3. De tube en de dome (zacht dopje) zouden perfect in elkaar moeten passen.

4. Hoe kan ik mijn hoortoestellen resetten?

Volg de onderstaande stappen als je hoortoestellen een foutstatus weergeven.

Programma's of instellingen worden hierdoor niet verwijderd.

1. Hou het onderste gedeelte van de multifunctionele knop minimaal 15 seconden ingedrukt. Het maakt niet uit of het hoortoestel is in- of uitgeschakeld voordat je op de knop drukt. Er brandt geen lampje en er wordt geen geluidssignaal afgegeven wanneer de 15 seconden zijn verstreken.
2. Plaats de hoortoestellen in de oplader die op de netvoeding is aangesloten en wacht tot het indicatielampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. De hoortoestellen zijn nu klaar voor gebruik.