



Onderhoudsinstructies

Achter het oor - batterijen - oorstukje

Overzicht:


1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik de batterijen van mijn hoortoestellen vervangen?



1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

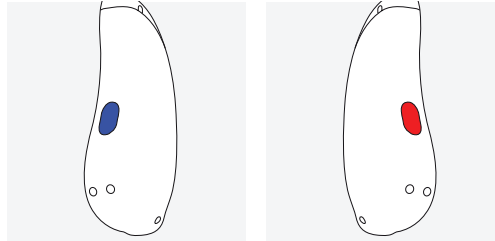

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?


1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in je **rechteroor**, **blauw** is voor je **linkeroor**
3. Neem het hoortoestel vast aan de bovenzijde van het oorstukje, met de punt naar het oor
4. Plaats de punt in je gehoorgang en druk het oorstukje met een draaibeweging aan
5. Trek hierbij eventueel lichtjes je oorlel naar beneden
6. Duw nu zacht tegen het oorstukje zodat dit volledig in je oorschelp komt te zitten
7. Schuif het hoortoestel vervolgens achter je oorschelp
8. Je hoortoestel is correct geplaatst

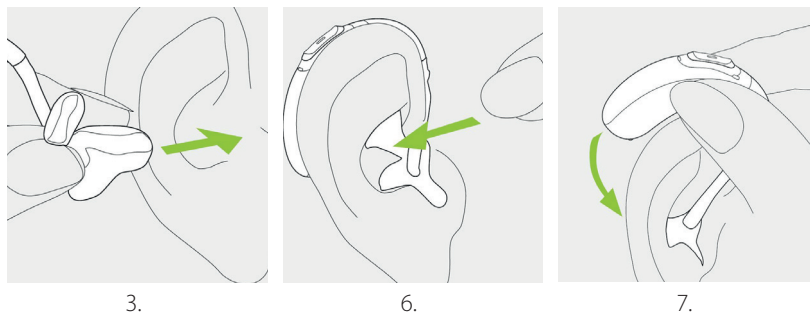

Let op: Controleer het oorstukje goed. Het mag niet uitsteken en geen pijn doen. Als het toestel goed zit en je het niet aanraakt, mag het niet meer fluiten.

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?

1. Neem het slangetje vooraan het oor vast tussen duim en wijsvinger
2. Trek zachtjes met je vrije hand je oorlel naar beneden
3. Haal het hoortoestel rustig uit je oor met een lichte draaibeweging

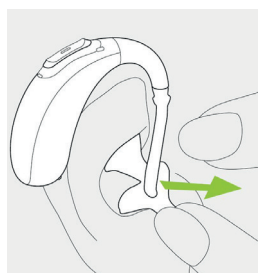

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en oorstukjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en de oorstukjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- Reinigingstabletten
- Blaaspeer
- Droogtabletten of droogbox

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

Algemene informatie

Voordat je haarlak of make-up gebruikt, dien je het hoortoestel uit je oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Je hoortoestellen zijn bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet je de hoortoestellen schoonmaken en daarna drogen.
- De hoortoestellen worden gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Dagelijks onderhoud

Hoortoestellen

Inspecteer het oorstukje en de slang op oorsmeer en vocht. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je hoortoestellen. Het wordt afgeraden om de hoortoestellen af te spoelen met water, omdat vocht hierdoor in het hoortoestel kan achterblijven. Vraag jouw audicien om advies wanneer je je hoortoestellen grondig dient te reinigen. Leg je hoortoestellen dagelijks in de daarvoor voorziene droogbox of droogdoos met droogtablet.

Wekelijks onderhoud

Hoortoestellen

Reinig het hoortoestel met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Reinig daarnaast wekelijks je oorstuk. Trek het oorstuk los van het hoortoestel en leg het in water samen met een reinigingstablet. Laat het oorstuk 30 minuten weken. Spoel het oorstuk af met proper water. Blaas het oorstuk en de slang goed droog met de blaaspeer. Bevestig het oorstuk terug op het hoortoestel. Let op de juiste richting. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere reiniging kan je contact opnemen met jouw audicien.


Maandelijks onderhoud

Inspecteer je akoestische slang op kleurveranderingen, verharding of scheuren. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dien je de akoestische slang te vervangen. Knip de nieuwe slang even lang af als de oude slang en vervang deze.

3. Hoe kan ik de batterijen van mijn hoortoestellen vervangen?

Wanneer de batterijen van je hoortoestellen bijna leeg zijn, krijg je twee piepjes te horen. Je hebt dan nog ongeveer 30 minuten om de batterij te vervangen (dit kan verschillen, afhankelijk van de instellingen van het hoortoestel en de batterij). Wij raden aan om altijd een nieuwe batterij bij de hand te hebben.

1. Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.
2. Open de batterijlade.
3. Plaats de batterij in de batterijlade met het "+"-symbool naar boven gericht.

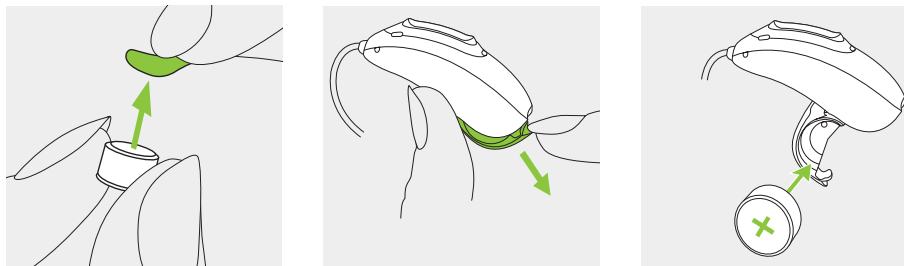

Indien het sluiten van de batterijlade moeizaam gaat: controleer of de batterij juist is geplaatst en of het "+"-symbool naar boven wijst. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal het hoortoestel niet werken en kan de batterijlade beschadigd raken.