



Onderhoudsinstructies

Achter het oor - oplaadbaar - oorstukje

Overzicht:


1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik mijn hoortoestellen resetten?



1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

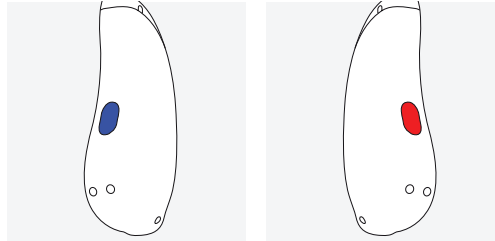

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?


1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in je **rechteroor**, **blauw** is voor je **linkeroor**
3. Neem het hoortoestel vast aan de bovenzijde van het oorstukje, met de punt naar het oor
4. Plaats de punt in je gehoorgang en druk het oorstukje met een draaibeweging aan
5. Trek hierbij eventueel lichtjes je oorlel naar beneden
6. Duw nu zacht tegen het oorstukje zodat dit volledig in je oorschelp komt te zitten
7. Schuif het hoortoestel vervolgens achter je oorschelp
8. Je hoortoestel is correct geplaatst

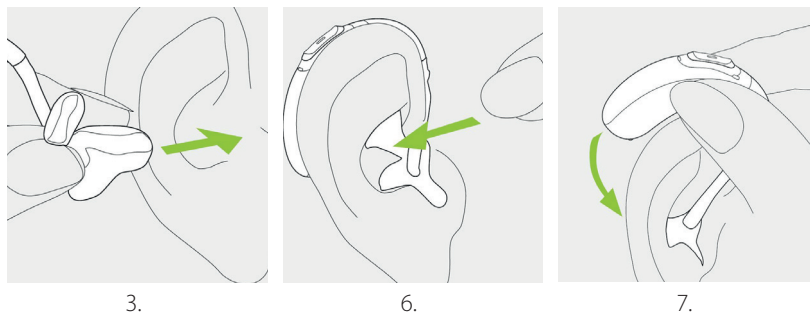

Let op: Controleer het oorstukje goed. Het mag niet uitsteken en geen pijn doen. Als het toestel goed zit en je het niet aanraakt, mag het niet meer fluiten.

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?

1. Neem het slangetje vooraan het oor vast tussen duim en wijsvinger
2. Trek zachtjes met je vrije hand je oorlel naar beneden
3. Haal het hoortoestel rustig uit je oor met een lichte draaibeweging

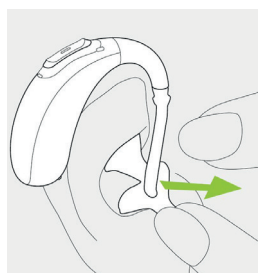

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en oorstukjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en de oorstukjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- Reinigingstabletten
- Blaaspeer
- Droogtabletten of droogbox

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen en oplader zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

Algemene informatie

Voordat je haarlak of make-up gebruikt, dien je het hoortoestel uit je oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Je hoortoestellen zijn bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet je de hoortoestellen schoonmaken en daarna drogen.
- De hoortoestellen worden gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Dagelijks onderhoud

Hoortoestellen

Inspecteer het oorstukje en de slang op oorsmeer en vocht. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je hoortoestellen. Het wordt afgeraden om de hoortoestellen af te spoelen met water, omdat vocht hierdoor in het hoortoestel kan achterblijven. Vraag jouw audicien om advies wanneer je je hoortoestellen grondig dient te reinigen. Leg je hoortoestellen dagelijks in de daarvoor voorziene droogbox of droogdoos met droogtablet.

Oplader

Zorg dat de oplaadingangen schoon zijn. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw oplader.

Wekelijks onderhoud

Hoortoestellen

Reinig het hoortoestel met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Reinig daarnaast wekelijks je oorstuk. Trek het oorstuk los van het hoortoestel en leg het in water samen met een reinigingstablet. Laat het oorstuk 30 minuten weken. Spoel het oorstuk af met proper water. Blaas het oorstuk en de slang goed droog met de blaaspeer. Bevestig het oorstuk terug op het hoortoestel. Let op de juiste richting. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere reiniging kan je contact opnemen met jouw audicien.

Oplader

Verwijder stof of vuil vanuit de oplaadsleuven met een pluisvrije doek.

Maandelijks onderhoud

Inspecteer je akoestische slang op kleurveranderingen, verharding of scheuren. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dien je de akoestische slang te vervangen. Knip de nieuwe slang even lang af als de oude slang en vervang deze.

3. Hoe kan ik mijn hoortoestellen resetten?

Volg de onderstaande stappen als je hoortoestellen een foutstatus weergeven.

Programma's of instellingen worden hierdoor niet verwijderd.

1. Hou het onderste gedeelte van de multifunctionele knop minimaal 15 seconden ingedrukt. Het maakt niet uit of het hoortoestel is in- of uitgeschakeld voordat je op de knop drukt. Er brandt geen lampje en er wordt geen geluidssignaal afgegeven wanneer de 15 seconden zijn verstreken.
2. Plaats het hoortoestel in de oplader die op de netvoeding is aangesloten en wacht tot het indicatielampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. Het hoortoestel is nu klaar voor gebruik.